


MANUAL DE UTILIZARE

C-Hunter



Masuri precautiei

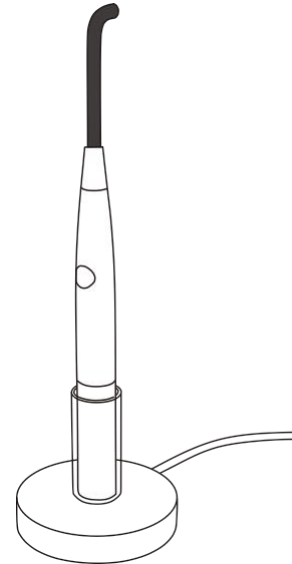

Atenție: vă rugăm să citiți manualul foarte bine înainte de a utiliza aceste echipamente, acesta va fi ghida pentru a funcționa în mod corespunzător.

1. Acest aparat trebuie să fie utilizat în strictă conformitate cu instrucțiunile cuprinse în acest ghid al utilizatorului. Fabricantul nu va lua nici o responsabilitate pentru daune provocate de utilizarea necorespunzătoare.
2. Înainte de a conecta baza de încărcătorul sau mâner la puterea principale, asigurați-vă că tensiunea de alimentare este armonie cu gama de tensiune incarcator. Tensiuni necorespunzătoare ar deteriora aparatul și provoca pericol pentru pacientul sau operatorul.
3. Nu pot vedea lumina, cu ochii tăi fără protecție, este dăunător pentru ochii tăi. Pentru a evita ochii obținerea în contact cu lumina direct, vă rugăm să adune ochiul protector.
4. Înainte de a utiliza, lăsați aparatul să ajungă la temperatura camerei. Mai ales când aparatul a fost eliminat dintr-un loc rece într-un loc cald.
5. Nu folosi orice altă baterie cu excepția acumulator original; în caz contrar acesta va duce la leziuni severe.
6. Nu puneți aparatul la obiectele inflamabile și nu atingeți lichide inflamabile cu acest aparat.
7. Pentru a evita șocul electric, nu introduceți orice alte părți în dispozitiv; Aceasta poate provoca electrocutare sau daune.
8. Vă rugăm să folosiți nostru de accesorii, cum ar fi: lumina ghid, adaptor, și bateria. Nu luăm responsabilitatea pentru orice problema sau deteriorare din cauza folosind alte părți whichis nu furnizate de noi.
9. Evita detergentul în dispozitivul, în cazul în care cauzează scurt-circuit sau problemă.

10. Nu este permis să modificați aparatul în orice condiție. Orice demontare sau modificare va determina theinvalidation de garantare.
11. Tensiune instabile și dacă este în mediul electromagnetic va interfera funcționarea normală.
12. Nu folosiți aparatul la pacientul care are stimulator cardiac inima cu el.
13. Atunci când renunțați la accesorii, vă rugăm să respecte cu Regulamentul local, dacă este necesar, contactați Centrul nostru de serviciu să-l ia înapoi.

Configuratie standard

Maner aparat		1
Baza de incarcare		1
Ghidaj optic	90°)	1
Ghidaj optic	120°)	1
Adaptor		1
Ochelari		1

Scop



Acest produs este folosit pentru o intervenție chirurgicală dentară, în funcție de proprietatea special fluorescența produsul de degradare la bacterii pe cariilor, este mai ușor să-țintă și eliminarea substanței infectate pe dinte. Acest produs oferă doar la stomatologi care deja au fost instruiți și de a folosi doar în clinica și laborator.

Construcție, instalare și folosire

Acest produs este format din ghid de lumina, carii diagnosticare mâner, tarifare de bază, adaptor și ochelari de protecție.

Instalați tija ghid de lumina

Introduceți tija ghid de lumina direct în mâner până când auzi un sunet clic ușoară și simțiți că aceasta se fixează în locas.

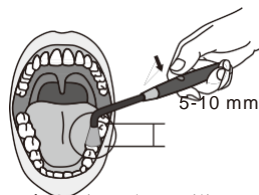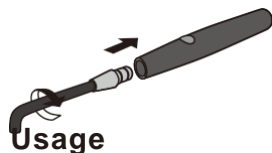


1. Vă rugăm să puneți ochelari de protecție înainte de a utiliza, pentru a preveni ochii de a fi deteriorate de lumina albastră.
2. În timpul tratamentului, puneți capul de fibra optică la dintelui (distanța dintre fibra optică și dinte ar trebui să fie aproximativ 5-10mm).
3. Atunci când echipamentul este standby, apăsați butonul de alimentare pentru a porni, fibra optică va ieși lumina, apăsați butonul din nou va închide.
4. Dinte va fi afișat fluorescent, atunci când lumina atinge, rezultatele fluorescente lumina sondei informații privind suprafața de carii, care poate ajuta tratamentul. Substanță care, cu grade diferite de sănătate va

arăta unele diferențe pe culori, zona verde fluorescentă indică substanța sănătos, fluorescentă roșie arată caria.

Baterie

Prima dată când utilizați aparatul, vă rugăm să asigurați-vă că acesta este complet încărcat, acest proces durează aproximativ 1,5 ore.

Încărcare

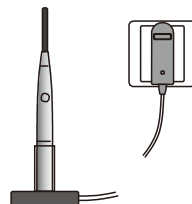

1. Când unitatea în stare de utilizare este de la tensiune scăzută, lumina va flash-uri fiecare 1s pentru a reaminti de utilizator pe care acesta ar trebui să fi perceput.
2. Vă rugăm să vă conectați sursa de alimentare corespunzătoare, indicatorul de adaptor va porni. Apoi puneți unitatea în baza încărcării.
3. Puneți unitatea într-o bază de încărcare conectată, indicatorul de încărcător va transforma în roșu, înseamnă că bateria se încarcă.
4. După terminarea taxei, indicatorul în baza de tarifare va transforma în verde, unitatea va opri automat de taxare.

Întreținere și curățare

1. Vă sugerăm unitatea ar trebui să fie curățată și sterilizată înainte de prima folosire.
2. Evitați să folosiți detergent sau material care conține ingredientul inflamabil, dacă da, asigurați-vă că o completează evaporată înainte de începerea operațiunii.
3. Atunci când curățați mânerul și bateria, mânerul și de bază trebuie să fie separate complet. Atunci când este folosit pentru următoarea pacient, tija ghid de lumina trebuie curățată și sterilizată.

4. Corpul principal și accesoriile pot fi curățate cu alcool sau detergent neutru, nu este permis să utilizeze caustice sau frecare detergent, și nici o curățare cu ultrasunete.
5. Nu face tija ghid de lumina atinge orice elemente greu după utilizarea în caz de zgărieturi la suprafața, vă rugăm să verificați dacă există orice material de pe terminal, dacă da, curățați-l cu instrument din plastic, don't utilizare instrument de metal. Dacă tija ghid lumina este deteriorat, este mai bine pentru a înlocui unul nou.
6. Tija ghid de lumină pot fi curățate cu alcool, sau poate fi sterilizat timp de 3 minute în starea: 135°C.
7. Vă rugăm să pune mâner pe baza de încărcătorul dacă încetează de lucru pentru o perioadă scurtă de timp, dar dacă mult timp nu folosesc, te rog scoate ghid de lumină și baterie, salvați-le în stare bună.

Depozitare și transport

1. Acest echipament ar trebui să fie mutate cu grijă din șoc, și a instala sau păstra în locul pe care se încearcă și se răcească.
2. Evita să fie stored cu produse toxice, corozive, inflamabile, explozive.
3. În timpul transportului, șoc și impactul ar trebui să fie evitate, și ridicați-securitate.

Garantie

Certificatul de garanție al acestui echipament este de 12 luni, baterie și adaptor sunt 6 luni, alte accesorii nu sunt incluse în certificatul de garanție.

Fisa tehnica

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1. Adaptor curent : | Input : 100-240Vac 50/60Hz
Output : DC 5V/ 0.5A |
| 2. Li-ion baterie | Voltage : DC3.7V
Capacity : 320 mAh |
| 3. Temperatura Operare: | +10°~+40°C |
| Stocare: | -10° ~+55°C |
| 4.Umiditate Operare: | 30~75%RH |
| Stocare: | 20~85%RH |
| 5. Presiunea atmosferică operare: | 80~106kPa |
| Stocare: | 50~106kPa |
| 6. Protecție electrică : | Type B |

Simboluri și definiții



Echipament clasa II



curent



Aparat tip B



Atentie cititi instructiunile



Doar interior



WEEE



Cititi manualul de utilizare