


NEOMED, s.r.o.

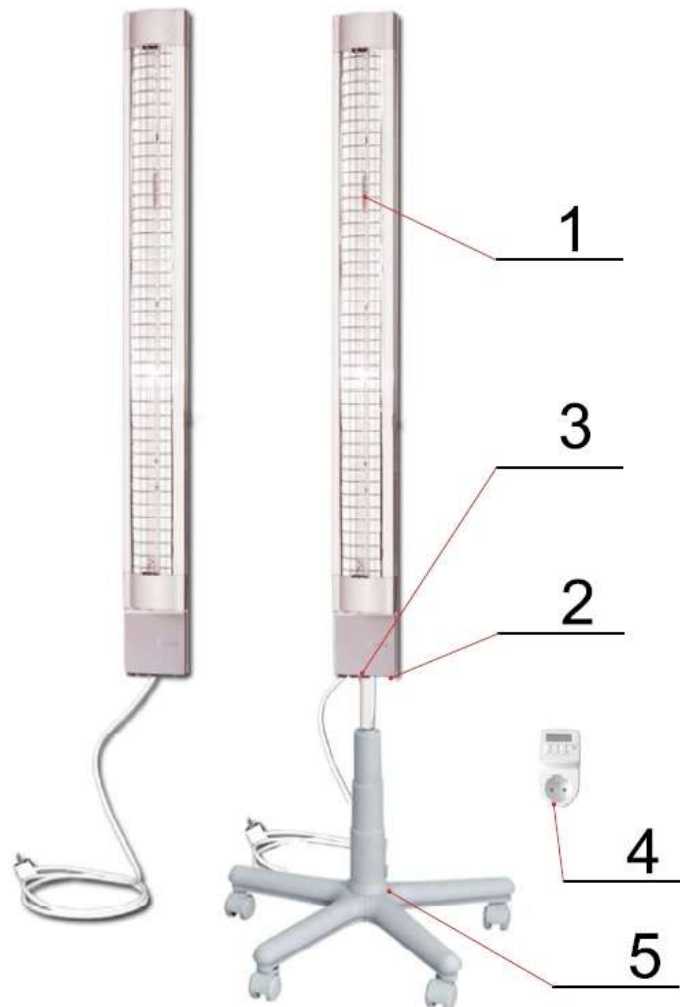


Instrucțiuni de utilizare

LAMPĂ GERMICIDĂ

G A R A 3 0 W O

G A R A 3 0 W O / M

 **NEOMED, s.r.o.**
Gaștanová 2
066 01 Humenné
Phone : +421 577884222, e mail : neomed@neomed.sk
www.neomed.sk



CE 2265

Stimate client,

Îți mulțumim că te-ai decis să cumperi un produs NEOMED.

Pentru a putea folosi toate proprietățile produsului dumneavoastră, vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni.

Instrucțiuni generale

Prezenta broșură este inseparabilă față de produs. Este necesar să fie păstrată în așa fel încât să fie ușor disponibilă oricând.

Acest cadru marchează instrucțiuni și atenționări importante.

Acest produs îndeplinește cerințele standard conform EN 60601-1, și cerințele împotriva interferențelor conform EN 60601-1-2.

Operarea fără întrerupere și în siguranță este asigurată dacă:

- produsul este utilizat conform acestui manual de utilizare

Dacă sunt utilizate accesoriile sau consumabile neaprobate, compania NEOMED nu garantează operarea în siguranță sau fără întreruperi a aparatului.

Atât durata cât și condițiile de valabilitate a garanției sunt limitate de condițiile notate în Certificatul de Garanție (vezi mai jos). Durata garanției oferite se prelungește cu durata eventualelor reparații dacă acestea au loc în condițiile de garanție.

Atenționări de siguranță

Siguranță

Acest produs poate fi utilizat doar de către persoane care au citit și au înțeles conținutul prezentului manual și pot aplica metodologia de utilizare a acestui produs. Calificări necesare – personal instruit în ceea ce privește regulamentele de utilizare a echipamentelor electrice.



Nu deschideți carcasa produsului. Toate reparațiile trebuie efectuate doar de către specialiști.



Nu vă uitați direct la tubul emițător. Radiația emisă poate cauza inflamarea ochilor.

Radiația UV în expunere directă poate cauza îngălbenirea materialelor plastice, în special a celor deja

învechite, precum și moartea plantelor.

1. Scop și utilizare

Tubul emițător este un dispozitiv cu construcție deschisă, proiectat pentru eliminarea bacteriilor și microorganismelor de pe suprafețe și din aer. Se utilizează în cabinete de stomatologie, cabinete medicale, spații de producție farmaceutică, industrie și oriunde este nevoie ca mediul să fie sterilizat.

Operarea produsului este interzisă în prezența persoanelor.

2. Date tehnice

Voltaj nominal	230 V
Frecvență nominală	50 Hz
Putere nominală	75 VA
Dimensiuni	1 050 x 105 x 50 mm
Greutate	3 kg
Programator extern	7 moduri de operare
Siguranță	IP 20

3. Descriere

Tubul emițător funcționează atât în poziție verticală cât și orizontală la montarea pe perete. La montarea pe suport mobil se poziționează doar vertical. Sursa de radiație este lampa germicidă /1/ localizată în interiorul carcasei principale cu expunere directă (radiație directă). Pornitul și opritul lampii se poate face prin acționarea butonului principal situat în capatul de jos al lampii (instalare pe suport mobil).

Pentru funcționarea automată se acționează programatorul /4/. Descrierea funcționării programatorului se face prin documentație auxiliara. Se poate atașa și o priză cu telecomandă când se dorește acționarea de la distanță.

Perioada recomandată de funcționare: 1-2 ore. După perioada de sterilizare se recomandă aerisirea spațiului pentru o perioadă de 2 ore. Viata de funcționare a tubului germicid este de 8000 ore.

4. Asamblarea:

Emitatorul germicid - la fixarea pe perete in pozitie orizontala sau verticala se face cu respectarea distantei de 80 cm dintre tavan si partea superioara a asamblului..

Pentru varianta pe suport mobil vedeti instructiunile din figura 1

EC DECLARATION OF CONFORMITY

in compliance with § 23 law no. 56/ 2018 Coll. about technical requirements of products and conformity assessment and amendment to certain laws, as amended,

Manufacturer : NEOMED, s.r.o., Gaštanová 2, 066 01 Humenné

Device identification: Germicidal emitter
Variants : GARA 30WO, GARA 30WO/C, GARA 30WO/KL
GARA 30WO/M, GARA 30WU, GARA 30WU/M,
GARA 2x30WK, GARA 2x30WK/M

Medical device :
Class : I

Used standards : STN EN 60598-1:2015, STN EN 60698-2-1, STN EN 62493,
STN EN 61347-1, STN EN 61347-2 -3

Conformity assessment procedure according to : Modul A1

Name and code of notified
Body (NB): 3EC International , NB 2265

Certificate Quality
Management system: ISO 9001: 2015, No. Q-0212/19, validity 17.08.2022

We hereby declare that the product above is safe for its intended use.

In the production process, the conformity of all products placed in the market with the technical documentation is ensured. The properties of the product meet the technical requirements that apply to this product and which are specified in the relevant government regulations, or in the other technical regulations.

All documents, including technical documentation, are kept at manufacturers' .
This medical device is CE marked.

Place : Humenne, date 17.08.2019

Name and function of signatory empowered
to bind the manufacturer : Ján Kľučár , director



Signature :
Stamp :



NEOMED, s.r.o.

Gaštanová 2
066 01 Humenné
Slovakia

tel/fax: +421 57 788 4222

e-mail: neomed@neomed.sk

<http://www.neomed.sk>

GUARANTEE

Product	Germicidal emitter	
Type	GARA 30 WO	Serial number
guarantee for quality and functions of product during		
months from day of sale, but max	<i>12</i>	months from delivering

CONDITIONS OF GUARANTEE:

In the agreed time organisation repairs all kinds of disorders, under this conditions

- a, usage of device was under recommendation of producer
- b, device was not overloaded
- c, usage of device was not unprofessional
- d, device was placed on recommended

Device in guarantee cannot be dismantled.

CERTIFICATE OF INSPECTION

NEOMED, s.r.o. certifies that product described above has been inspected and found conform to the applicable international standards and NEOMED standards.

Stamp of producer:

Day of sale: 5/2020

Sign of examination:


REPORT ABOUT INSTALATION OF DEVICE

Day of install	Stamp of install. company	Tel./Fax	Singnature

INFORMATIONS ABOUT REPAIRS

Description of disorder	Day of repair	Stamp of service company

GARA 30WO/M

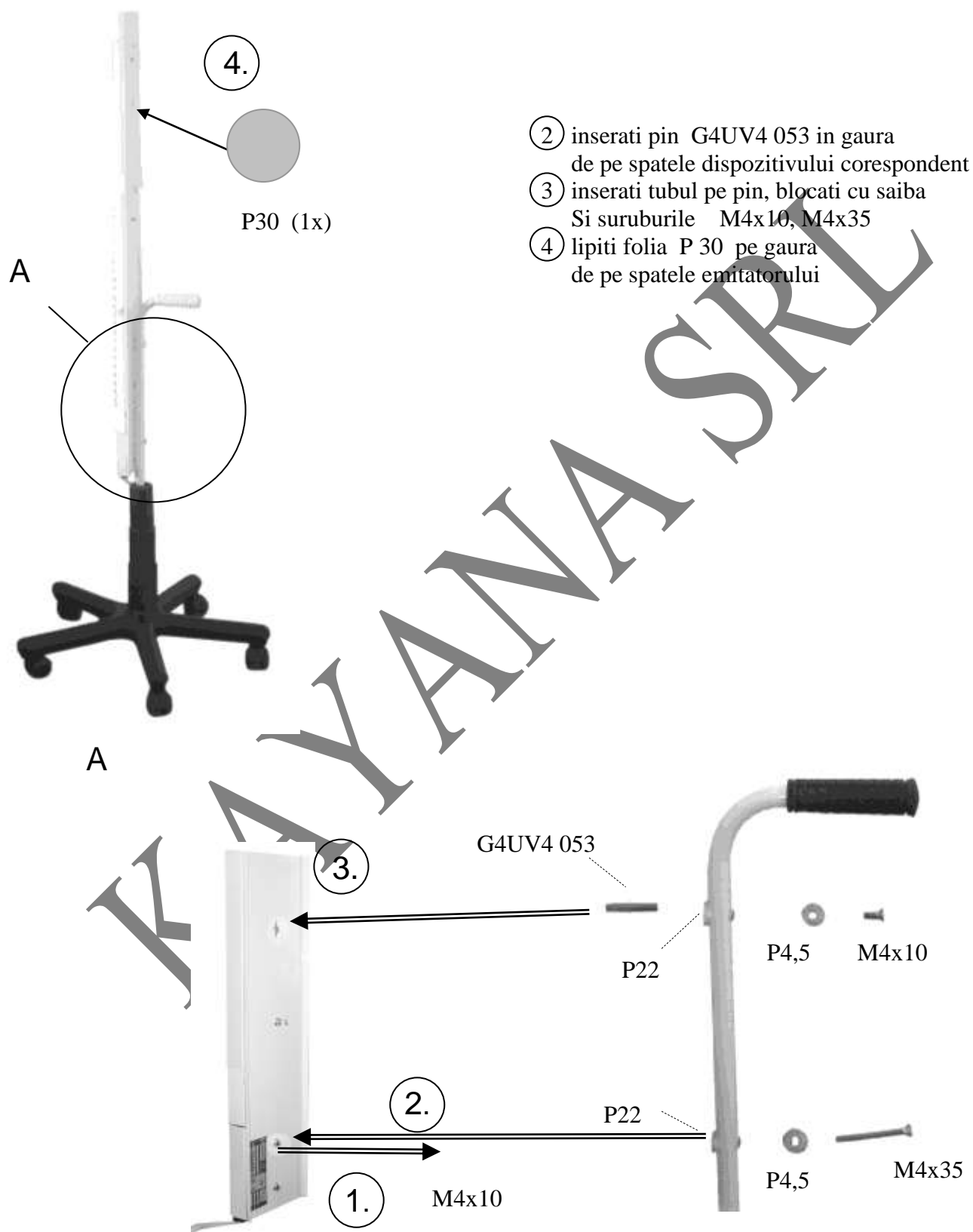

Picture. 1 Asamblarea suportului mobil